



Efecto de la estructura molecular en la capacidad fluorescente de los colorantes

1. Encender el Espectrofluorímetro y el Ordenador por este orden. Esperar un tiempo para que la lámpara se estabilice.
2. Utilizar **usuario: alumno** (si se muestra)
3. Abrir el programa **FL Solutions**. Aparece la siguiente pantalla:

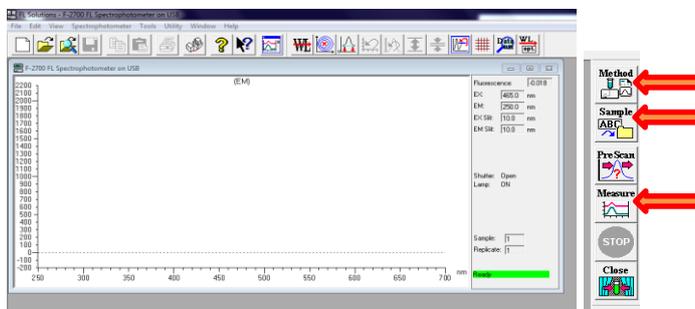

4. Abrir .
5. En la pestaña **General**, presionar **Load** y seleccionar el método:


Estructura molecular y capacidad fluorescente.

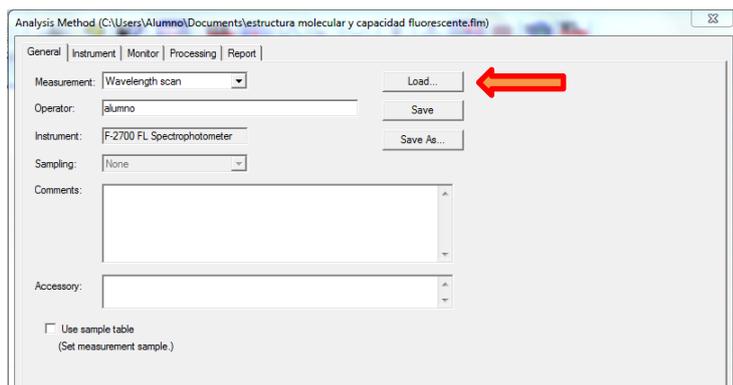

No presionar en ningún caso:

- Save
- Save As

6. Abrir la pestaña **Instrument**, elegir el tipo de espectro (excitación o emisión) y los parámetros deseados

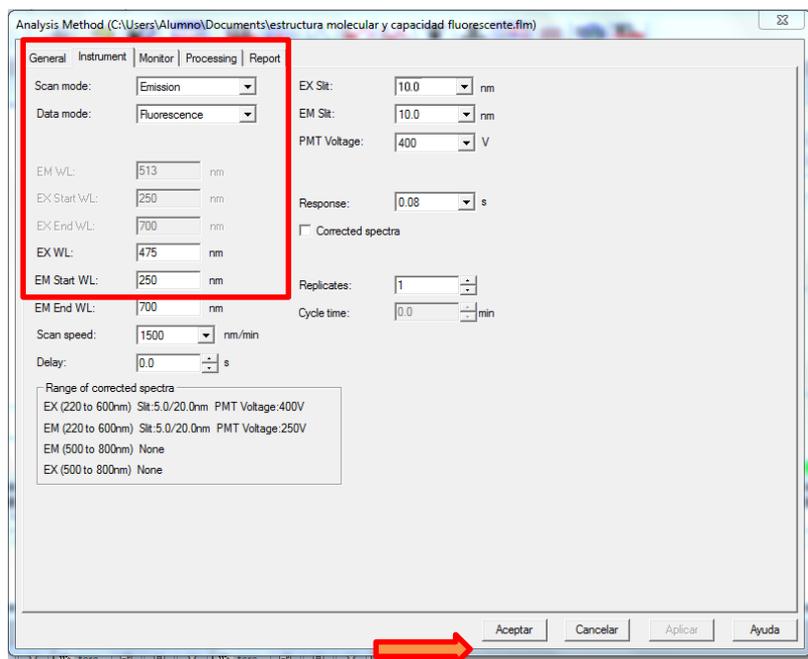


7. Presionar aceptar.


8. Introducir la muestra en el portacubetas.

9. Seleccionar  y nombrar la muestra y el fichero.

Se recomienda nombrar igual **sample name** y **file name**, añadiendo las iniciales del operador a **file name**.

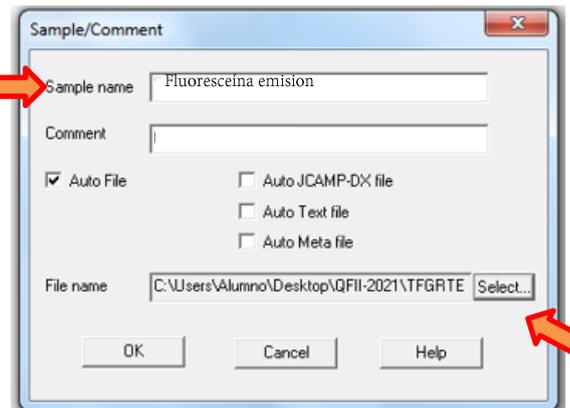

Los ficheros se guardan de forma automática en la carpeta del escritorio: **QFII-2021**. El programa añade al nombre de cada fichero la fecha y hora de realización.

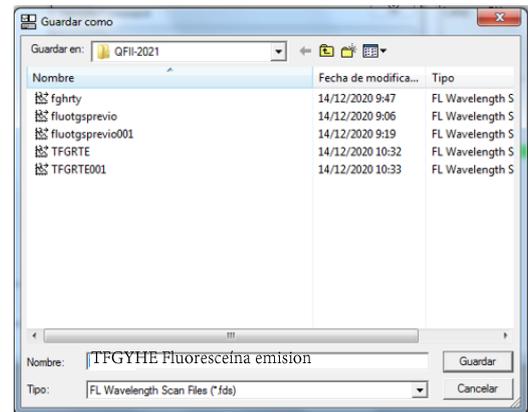


10. Presionar OK

11. Seleccionar . El equipo comienza a realizar el espectro. Es posible detener el proceso con el icono de **stop**.

12. Si el espectro no aparece, reescalar el gráfico con el icono 

13. Los espectros aparecen **superpuestos** en la ventana **WAVE** y **minimizados** por separado en la parte inferior de la pantalla.

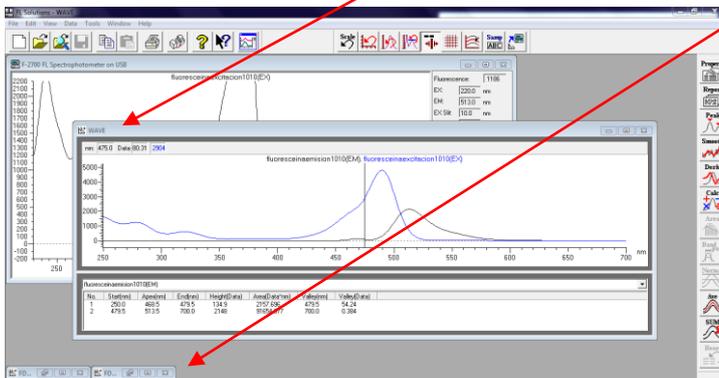


La superposición WAVE no se guarda automáticamente, al cerrarla se solicitará el nombre del fichero.

14. Para cada nuevo espectro repetir los pasos 4 y 6, 7, 8, 9, 10.


Para acceder a (6) hay que clicar en la ventana: **"F-2500FL Spectrophotometer on USB"**, que puede estar oculta en parte por la ventana de WAVE.

15. De forma automática se detectan los picos de cada espectro, la intensidad de fluorescencia y el área.

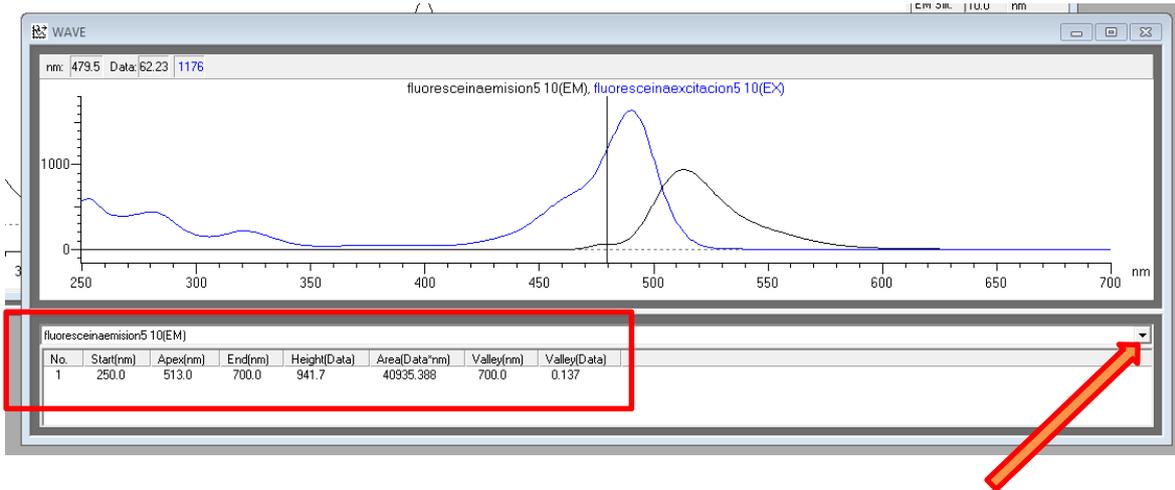

Se accede a los datos de uno u otro espectro con el desplegable.


16. Desplazando con el cursor la línea vertical se puede conocer la intensidad de la señal a cualquier λ

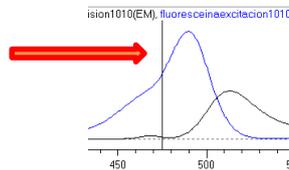

17. Para eliminar un espectro de la superposición, seleccionar , en la barra superior.




18. Para imprimir presionar  y seleccionar **print**.

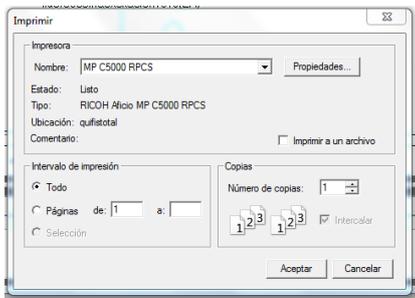

Para imprimir seleccionar **MP C5000 RPCS**
 Para convertir a PDF seleccionar **adobe PDF**

19. Al terminar **No guardar los cambios en el método**, cerrar el programa. Se abre la siguiente ventana ...

con esas condiciones presionar YES.

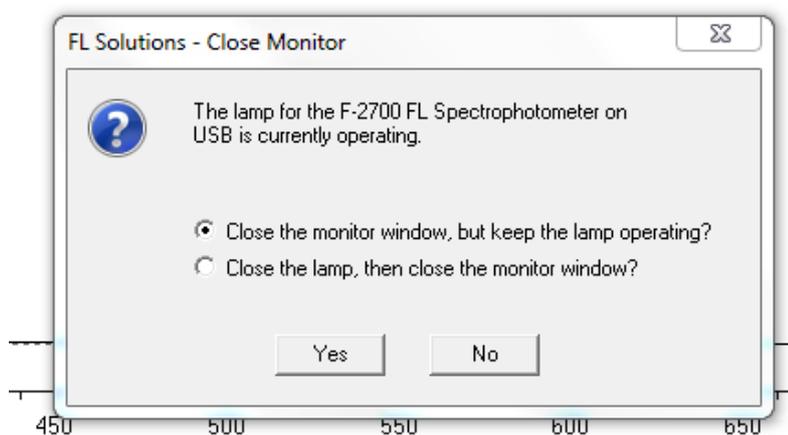

20. Apagar el espectrofluorímetro y el ordenador